


ВИКОРИСТАННЯ РОТОРІВ VETSCAN® :

- Вийміть пакет з ротором з холодильника безпосередньо перед тестуванням — час на розігрівання не потрібен.
- Використовуйте піпетку фіксованого об'єму 100 мкл
- Тримайте ротори лише за боки, не торкаючись штрих-коду чи центрального контейнера з розріджувачем
- Тримайте ротор у горизонтальному положенні під час завантаження у Vetscan VS2.
- Уникайте потрапляння бульбашок повітря у пробовідбірник:
 - ☐ Якщо утворюється повітряна бульбашка, додайте достатньо зразка, щоб заповнити область переливу на 1/3 - 1/2, як показано нижче
- Починайте кожне випробування протягом 10 хвилин після перенесення зразка в ротор
- Розгляньте можливість тестування плазми або сироватки:
 - ☐ Коли існує потенційна недостатність об'єму плазми (наприклад, у пацієнтів із зневодненням, собак-гончих)
 - ☐ У дуже хворих пацієнтів
 - ☐ У тварин, які щойно з'їли їжу з високим вмістом жиру
 - ☐ У собак, схильних до гіперліпідемії (наприклад, мініатюрних шнауцерів)

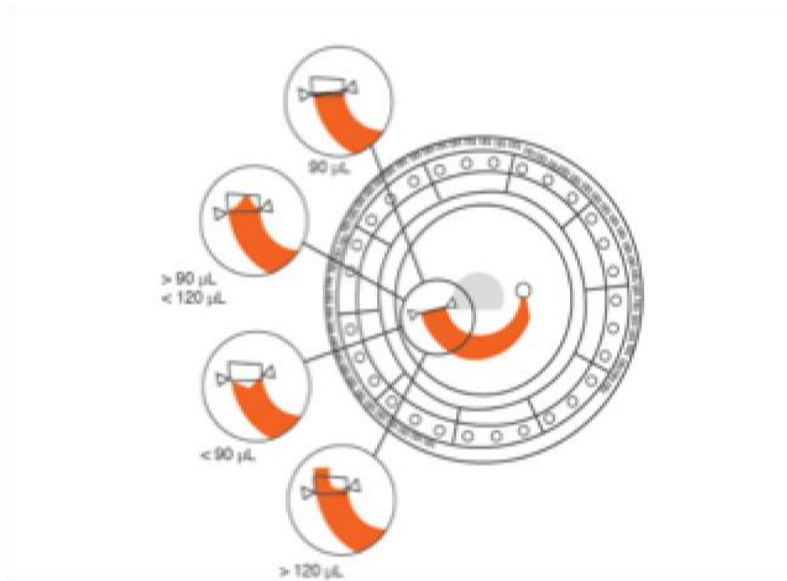

ЗАБОРОНЕНО:

- Зберігати ротори в морозильній камері
- Тримати ротор за центр
- Торкатися кінчика піпетки, інакше може виникнути хибне підвищення рівня амілази
- Використовувати зразки з пробірок з ЕДТА для будь-якого тестування на Vetscan VS2
- Виймати зразок з ротора та спроба знову ввести його в ротор
- Нанесення надлишку крові на порт для зразка, оскільки це може забруднити аналізатор (за винятком випадків, коли присутні бульбашки повітря — див. пункти «Не допускати забруднення»)
- Проливати кров на кільце штрих-коду або ротор
- Здійснювати аналіз рідин, відмінних від цільної крові, плазми або сироватки. Жодні інші рідини не підтримуються для використання з Vetscan VS2.